

Intervenção vascular // **Periférica**
Cateter balão PTA/0,035"/OTW

Passeo[®]-35 Xeo

Balão PTA de baixo perfil com excelente entrega em ampla variedade de medidas.



Cruzamento melhorado



Excelente entrega



Baixo perfil, ampla variedade de medidas




BIOTRONIK
excellence for life

Passeo-35 Xeo

Balão PTA de baixo perfil com excelente entrega em uma variedade de medidas.

Cruzamento melhorado

Ponta com perfil de entrada até 0,16 mm menor em comparação com os concorrentes líderes.¹

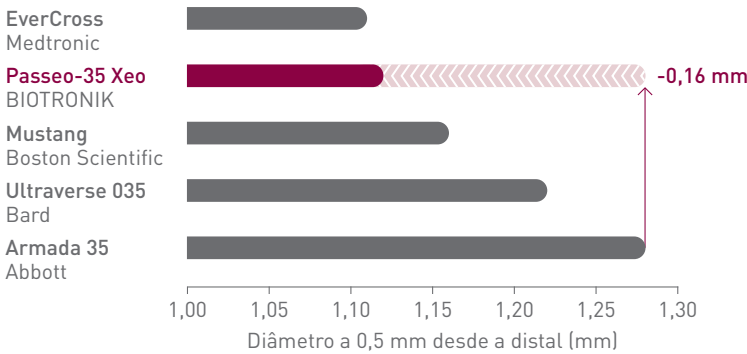



Ponta com perfil avançado

A ponta com perfil de entrada menor e a ponta cônica lisa do Paseo-35 Xeo facilitam o cruzamento.




Perfil de cruzamento mais baixo

Perfil de cruzamento até 0,22 mm menor em comparação com os concorrentes líderes.¹

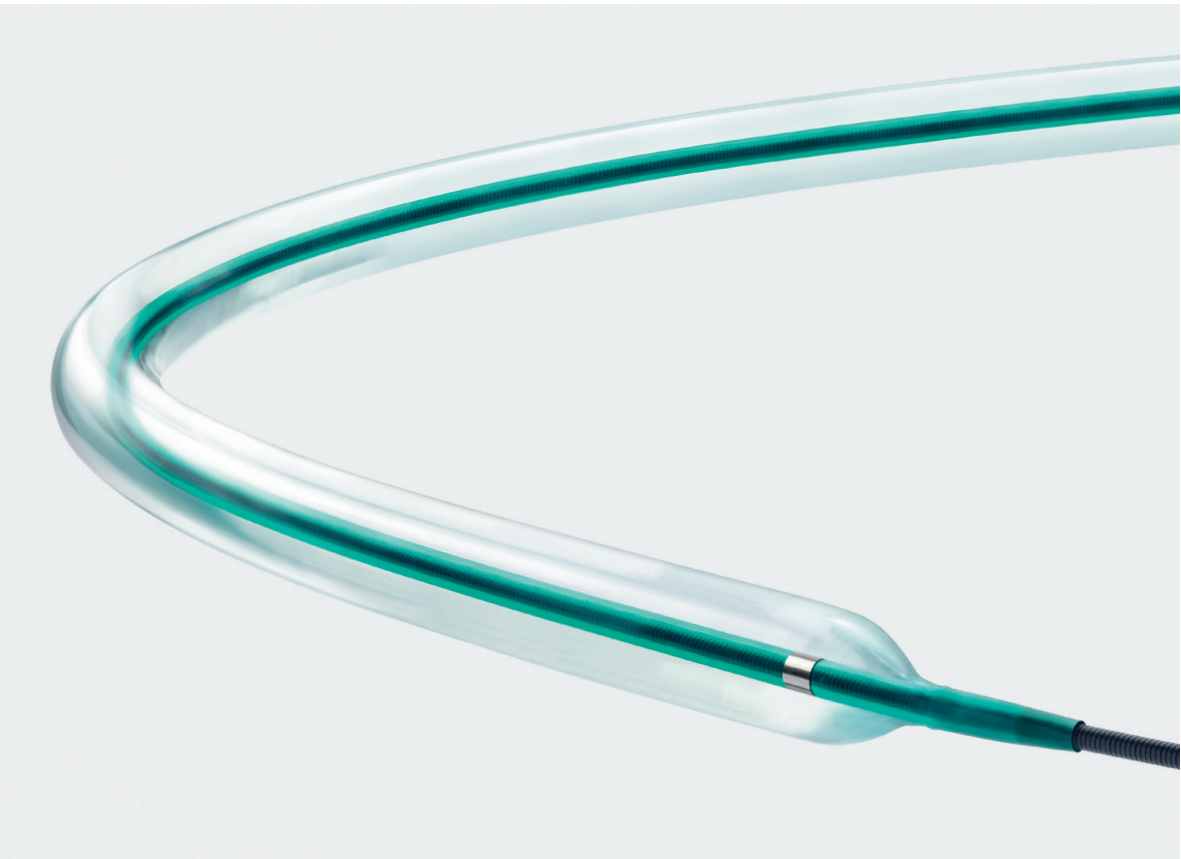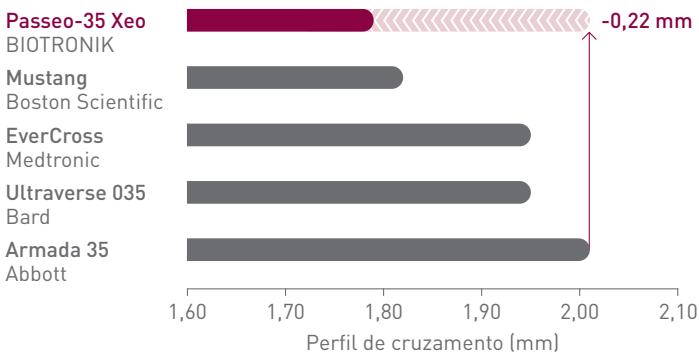


Excelente entrega

O cateter Paseo-35 Xeo oferece excelente navegabilidade e condutibilidade em comparação com os cateteres balão PTA líderes de 0,035".²

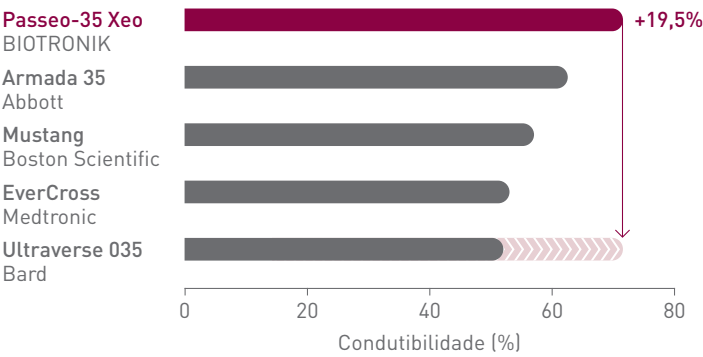

Baixo perfil, variedade de medidas

O Paseo-35 Xeo apresenta um design de baixo perfil com total compatibilidade com 5F de até 7,0 mm de diâmetro de balão e 250 mm de comprimento, 6F de até 10,0 mm e 7F de até 12,0 mm de diâmetro.

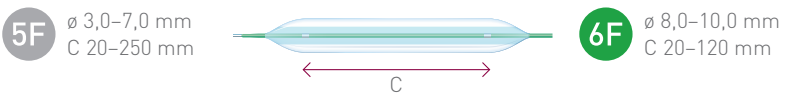


Perfil de entrada baixo e ponta cônica lisa
para um cruzamento melhor




Perfil de cruzamento baixo
para facilitar o cruzamento da lesão




Revestimento hidrofóbico
Design de patchwork

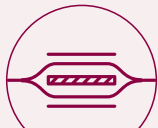


Melhor tempo de esvaziamento
devido ao design de shaft de tamanho específico

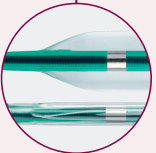

Compatibilidade com 5F
Até 7,0 x 250 mm

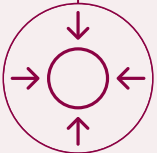


250 mm
Comprimento do balão de até 250 mm
ø 12,0 mm
Diâmetro do balão de até 12,0 mm

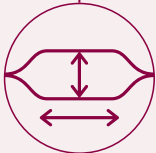

Abordagem radial
Comprimento útil de até 170 cm



Novo design de hub
com leitura de informações melhorada

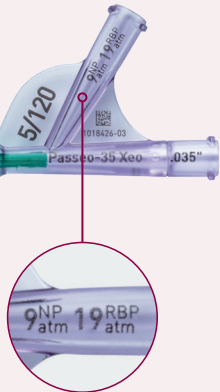

Paseo-35 Xeo

Balão PTA de baixo perfil concebido para cruzar

Passeo-35 Xeo

O Paseo-35 Xeo é indicado para dilatar estenoses nas artérias ilíaca*, femoral, poplítea e infrapoplíteia, bem como para o tratamento de lesões obstrutivas de fístulas arteriovenosas dialíticas nativas ou sintéticas. O Paseo-35 Xeo também é recomendado para a pós-dilatação de stents expansíveis por balão e autoexpansíveis na vasculatura periférica.**

Intervenção
vascular
Periférica



Dados técnicos – Cateter balão

Tipo de cateter	OTW	Marcas no balão	2 marcas radiopacas acopladas
Fio guia compatível	0,035"	Tamanhos	ø 3,0–12,0 mm; C: 20–250 mm
Ponta	Perfil de entrada baixo, colorido	Shaft	5,1–5,4F, lúmen duplo, revestimento hidrofóbico
Material do balão	SCP (polímero semi-cristalino), complacência controlada	Comprimento útil	90, 130 e 170 cm
Revestimento do balão	Revestimento hidrofóbico patchwork	Lúmen do fio guia	Revestimento hidrofóbico

ø do balão (mm)		NP ^a	RBP ^a	Comprimento do cateter 90 cm									
				Comprimento do balão (mm)									
				20	40	60	80	100	120	150	170	200	250
5F	3,0	9	21	428777	428786	428795	428804	-	-	-	-	-	-
	4,0	9	20	428778	428787	428796	428805	428814	428823	-	-	-	-
	5,0	9	19	428779	428788	428797	428806	428815	428824	428833	-	428843	428848
	6,0	9	16	428780	428789	428798	428807	428816	428825	428834	-	428844	428849
	7,0	9	15	428781	428790	428799	428808	428817	-	-	-	-	-
6F	8,0	9	14	428782	428791	428800	428809	428818	-	-	-	-	-
	9,0	9	12	428783	428792	428801	428810	428819	-	-	-	-	-
	10,0	8	11	428784	428793	428802	428811	428820	-	-	-	-	-
7F	12,0	8	10	-	428794	428803	428812	428821	-	-	-	-	-

ø do balão (mm) NP ^a RBP ^a				Comprimento do cateter 130 cm									
				Comprimento do balão (mm)									
				20	40	60	80	100	120	150	170	200	250
5F	3,0	9	21	428851	428860	428869	428878	428887	428896	428905	428910	428915	428920
	4,0	9	20	428852	428861	428870	428879	428888	428897	428906	428911	428916	428921
	5,0	9	19	428853	428862	428871	428880	428889	428898	428907	428912	428917	428922
	6,0	9	16	428854	428863	428872	428881	428890	428899	428908	428913	428918	428923
	7,0	9	15	428855	428864	428873	428882	428891	428900	428909	428914	428919	428924
6F	8,0	9	14	428856	428865	428874	428883	428892	428901	-	-	-	-
	9,0	9	12	428857	428866	428875	428884	428893	428902 ^b	-	-	-	-
	10,0	8	11	428858	428867	428876	428885	428894	428903 ^b	-	-	-	-
7F	12,0	8	10	-	428868	428877	428886	428895	428904 ^b	-	-	-	-

				Comprimento do cateter 170 cm									
ø do balão (mm)		NP ^a	RBP ^a	Comprimento do balão (mm)									
				20	40	60	80	100	120	150	170	200	250
5F	4,0	9	20	-	428935 ^b	428944 ^b	428953 ^b	-	428971 ^b	428980 ^b	-	428990 ^b	428995 ^b
	5,0	9	19	428927 ^b	428936 ^b	428945 ^b	428954 ^b	-	428972 ^b	428981 ^b	-	428991 ^b	428996 ^b
	6,0	9	16	428928 ^b	428937 ^b	428946 ^b	428955 ^b	-	428973 ^b	428982 ^b	-	428992 ^b	428997 ^b
	7,0	9	15	428929 ^b	428938 ^b	428947 ^b	428956 ^b	-	-	-	-	-	-
6F	8,0	9	14	428930 ^b	428939 ^b	428948 ^b	428957 ^b	-	-	-	-	-	-
	9,0	9	12	-	428940 ^b	428949 ^b	428958 ^b	-	-	-	-	-	-
	10,0	8	11	-	428941 ^b	428950 ^b	428959 ^b	-	-	-	-	-	-

^aNP = pressão nominal e RBP = pressão de ruptura nominal em atm (1 atm = 1,013 bar)

^bapenas 8 semanas de pré-venda

1. Dados em arquivo da BIOTRONIK. Comparado aos tamanhos de balão de 6,0 mm de diâmetro dos concorrentes líderes. IIB[P] 39/2017; 2. Dados em arquivo da BIOTRONIK. Comparado aos tamanhos de balão de 6,0 x 200 mm dos concorrentes líderes. *Observação para a Austrália: O Paseo-35 Xeo não foi aprovado pela Therapeutic Goods Administration para uso em artérias ilíacas comuns. **Indicação conforme o manual técnico. Paseo e Xeo são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas do grupo de empresas BIOTRONIK. EverCross é uma marca comercial ou marca comercial registrada do grupo de empresas Medtronic. Mustang é uma marca comercial ou marca comercial registrada do grupo de empresas Boston Scientific. Ultraverse é uma marca comercial ou marca comercial registrada da Becton, Dickinson and Company ou suas afiliadas. Armada é uma marca comercial ou marca comercial registrada do grupo de empresas Abbott.

BIOTRONIK AG
Ackerstrasse 6
8180 Bülach, Suíça
Tel. +41 (0) 44 8645111
Fax +41 (0) 44 8645005
info.vi@biotronic.com
www.biotronic.com

© 2020 BIOTRONIK AG – Todos os direitos reservados.
As especificações são sujeitas a modificação, revisão e atualização.

BIOTRONIK
excellence for life